

TRE TECNOLOGIE. UNA SOLA FILOSOFIA.

FIBRA DI VETRO

- Trasparente rinforzato in fibra di vetro •
Ottima estetica
Modulo elastico fisiologico
Ideale per tutti i settori

TRASLUCENTI

- Fibra ad elevate traslucenza •
Massima trasmissione della luce
Estetica eccellente
Ideali nel settore anteriore

FIBRA DI CARBONIO

- Fibra di carbonio ad alta resistenza •
Massima resistenza meccanica
Elevata affidabilità clinica
Ideali nel settore posteriore

*Per indicazioni d'uso dettagliato,
consultare le istruzioni incluse nella confezione*



Distribuzione
uniforme degli
stress



Modulo elastico simile alla dentina per la massima predicibilità clinica. Perno inserito fino a metà della dentina, con chiusura apicale in gutta-percha termocompattata per una sigillatura ottimale.

**AVANT, perni in fibra:
tecnologia che lavora
come il tuo dente**



Made in Italy



Scopri di più su InFibra®

bioloren®
metal free dental solutions

Via A. Volta 59 • 21047 Saronno (VA) Italy
+390296703261
info@bioloren.com • www.bioloren.com

Avant®

Perni in fibra ad alte prestazioni

Precisione - Estetica - Affidabilità

bioloren®
metal free dental solutions

I PERNI NON SONO TUTTI UGUALI

LA DIFFERENZA È NELLA FIBRA

Tutte le fibre AVANT® sono progettate per lavorare in sinergia con la struttura naturale del dente.

VETRO

Intreccio multidirezionale per massima elasticità

CARBONIO

Intreccio ad alta densità per massima resistenza

TRASLUCENTE

Struttura monodirezionale ad alta traslucenza

PROTOCOLLO SEMPLICE PER RISULTATI STRAORDINARI



Preparazione
del canale



Scelta del
perno AVANT®




Cementazione
adesiva




Restauro
finale




Successo
clinico

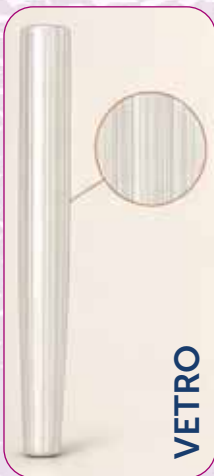

VETRO

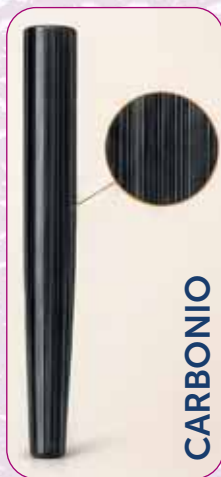

CARBONIO

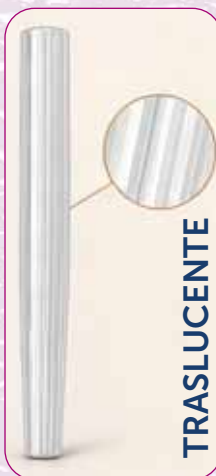

TRASLUCENTE

CARATTERISTICHE

MODULO ELASTICO SIMILE ALLA DENTINA

I perni in fibra AVANT® hanno un modulo elastico simile a quello della dentina, riducendo il rischio di fratture radicolari.

FLESSIBILITÀ CONTROLLATA

Assorbe e dissipa le sollecitazioni masticatorie, seguendo i movimenti naturali del dente.

DISTRIBUZIONE UNIFORME DELLO STRESS

La struttura in fibra permette una distribuzione equilibrata delle forze masticatorie, proteggendo la radice.

RESISTENZA ALLA FATICA

Le fibre ad alta resistenza garantiscono prestazioni stabili nel tempo.

LEGAME ADESIVO OTTIMIZZATO

La superficie trattata assicura un'adesione chimica e meccanica superiore con i cementi adesivi.

**RISULTATO:
RESTAURI PIÙ SICURI.
PIÙ DURATURI.
PIÙ NATURALI**

**Meno fratture. Più fiducia.
Più soddisfazione per te
e per i tuoi pazienti.**

VANTAGGI SU MISURA



PERNI CONICI

Adattamento ottimale lungo il canale

DIAMETRI apicali/coronal (mm)

0,8-1,25 1,0-1,45 1,2-1,65 1,4-1,85

PERNI CILINDRICI

Stabilità e semplicità di utilizzo

DIAMETRI (mm)

0,8 1,0 1,2 1,4 1,7

Avant®

bioloren®

metal free dental solutions